

IT Sostegno lombare universale Vulkan Classic 3023

Ideale per

- Indicato per alleviare i dolori dorsali causati da problemi alla schiena o lesioni, come stiramenti o spasmi muscolari
- Garantisce compressione e sostegno

Rischi e cautele

Non indossare se sono stati applicati unguenti, pomate o creme riscaldanti o che generano calore.

Se si sviluppano irritazioni o eruzioni cutanee, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Se l'infortunio è grave o non migliora dopo tre o quattro giorni, consultare un medico.

Non utilizzare se il supporto presenta segni di usura e/o danneggiamento.

Accertarsi che il supporto sia indicato per l'utente.

Pulizia e cura

- Lavare solo a mano, sotto i 40°C
- Non lavare con candeggina
- Non lavare a secco
- Non stirare
- Non asciugare a macchina

Istruzioni per l'uso

Per garantire il massimo beneficio, il supporto deve essere della taglia corretta. Per determinare la taglia corretta, misurare il girovita.

Assicurarsi che il sostegno non sia troppo stretto e non comprometta la circolazione del sangue.

Posizionare la parte inferiore del supporto il più in basso possibile sulla schiena e stringere per ottenere una vestibilità sicura ma comoda, quindi fissare sul davanti.

Materiali

80% Neoprene, 8% Elastico, 7% Poliestere, 3% Vetroresina, 2% Nylon.
Contiene gomma naturale.



NL Vulkan Classic 3023 - rugsteun (universeel)

Ideaal voor

- Geschikt voor verlichting van pijn in de onderrug als gevolg van rugproblemen en letsel, zoals spanning en spierspasmen
- Biedt compressie en steun

Gevaren en waarschuwingen

Draag dit product niet wanneer er verwarmende of warmteopwekkende smeersels, zalven of crèmes zijn aangebracht.

Stop het gebruik direct en raadpleeg een arts als er irritatie of eczeem ontstaat.

Raadpleeg een arts als u ernstig letsel hebt dat niet binnen drie tot vier dagen verbetert.

Bei Anzeichen von Verschleiß und/oder Schäden an der Unterstützung bitte nicht verwenden

Stellen Sie sicher, dass die Unterstützung für den Verwender geeignet ist

Reiniging en verzorging

- Alleen met de hand uitwassen op maximaal 40°C
- Niet bleken
- Niet strijken
- Niet stomen
- Niet drogen in de wasdroger

Instructies voor het aanbrengen:

Zorg voor een steun met de juiste maat om maximaal profijt te garanderen. Meet de omtrek van uw taille om de juiste maat te bepalen.

Zorg dat de steun niet te strak zit of de bloedbaan afknelt.

Plaats de onderzijde van de steun zo laag mogelijk en zorg dat hij stevig maar comfortabel zit. Maak daarna de voorkant vast.

Samenstelling van het materiaal

80% Neopreen, 8% Elastiek, 7% Polyester, 3% Glasvezel, 2% Nylon.
Bevat natuurrubber.



These user instructions are available in large print, please contact Performance Health Customer Services for a copy. Please retain these instructions for future reference.

Manufactured for
Performance Health International Ltd.
Nunn Brook Road, Huthwaite,
Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire,
NG17 2HU, UK.

UK:
Tel: 03448 730 035
Fax: 03448 730 100
www.performancehealth.co.uk

International:
Tel: +44 1623 448 706
Fax: +44 1623 448 784

Performance Health Supply, Inc.
W68 N158 Evergreen Blvd.
Cedarburg, WI 53012
USA
www.performancehealth.com

Performance Health ANZ
Unit 3, 3 Basalt Road,
Pemulwuy NSW, Australia 2145.
Tel: 1300 473 422
Fax: 1300 766 473

Performance Health France
13 rue André Pingat
CS 10045
51724 Reims cedex
France
Tel: 00(33) 03 10 00 79 30
Fax: 00(33) 03 10 00 79 49

PERFORMANCE
HEALTH

VULKAN

Vulkan Classic 3023 Universal Back Support



Ideal for

- Suitable for relief of lower back pain caused by back problems and injuries such as strains and muscle spasms
- Provides compression and support

Hazards & Cautions

Do not wear if warming or heat-generating liniments, ointments or creams have been applied.

Should an irritation or rash develop, discontinue use immediately and seek medical advice.

If your injury is severe or does not improve within three to four days seek medical advice.

Do not use in case of signs of wear and/or damage to the support

Ensure that the support is suitable for the user

Cleaning & Care


- Hand wash only below 40°C
- Do Not dry clean
- Do Not bleach
- Do Not iron
- Do Not tumble dry

Fitting Instructions

The support should be sized correctly to ensure maximum benefit. To select the correct Size measure the circumference around your waist.

Ensure that the support is not uncomfortably tight and does not restrict blood flow.

Position the bottom of the support as low down on your back as possible, tighten until firm but comfortable and fasten at the front

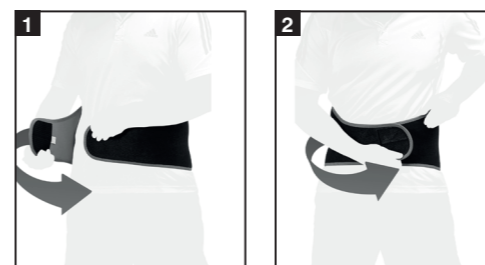

Available sizes

09 156 7239

Fits all sizes

Material Composition

80% Neoprene, 8% Elastic, 7% Polyester, 3% Fibreglass, 2% Nylon.
Contains natural rubber.

